


# somnipax guard standard

Férula de avance mandibular

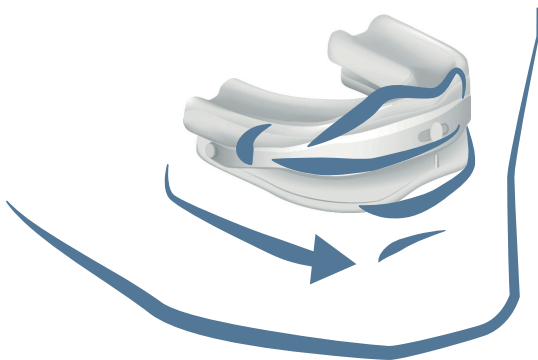

**Férula antirronquidos frente al ronquido simple y las interrupciones nocturnas de la respiración**

Férula de avance mandibular para la apnea obstructiva posicional del sueño, así como para el ronquido lingual básico

- **Gran comodidad:** gracias a su material suave y cómodo y a una forma con un volumen reducido que apenas se nota en la boca.
- **Aplicación muy flexible:** se adapta de forma individual a la mandíbula; la férula tiene una anchura variable y un avance que puede ajustarse de manera precisa.
- **Aplicable de inmediato:** la férula se adaptará in situ en la consulta médica y puede llevarse a casa y utilizarse directamente.


## ¿Cómo funciona una férula de avance mandibular (“férula antirronquidos”)?

Los ronquidos, pero también las interrupciones nocturnas de la respiración (“apnea”) se producen cuando el tejido en las vías respiratorias superiores se relaja y se afloja durante el sueño.

En muchos casos, esta relajación conduce a que la lengua se hunda en la garganta durante el sueño y constriña ahí las vías respiratorias o incluso las bloquee de forma temporal. En la zona más estrecha se producen fluctuaciones de aire y vibraciones que provocan los ronquidos. Si las vías respiratorias se bloquean por completo, se producen interrupciones de la respiración.



Una férula de avance mandibular como somnipax guard standard evita de forma muy efectiva que la lengua se hunda hacia atrás en la garganta.

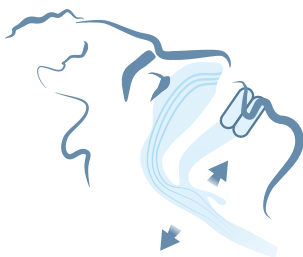

¿Cómo funciona? Desplazando la mandíbula inferior unos pocos milímetros hacia adelante, sometiendo con ello al músculo de la lengua a una ligera presión. Debido a esta ligera tensión, el músculo de la lengua ya no puede hundirse hacia atrás en la garganta. Las vías respiratorias se liberan y podrá dormir sin las peligrosas interrupciones de la respiración y sin los molestos ronquidos.


## Así es somnipax guard standard




La férula para el maxilar superior se adapta a la forma de la hilera de dientes superior y la férula para el maxilar inferior a la hilera inferior.

### Unión por medio de bandas

Ambas férulas están unidas mediante la banda de avance de plástico. De esta forma se garantiza el avance, se permite el movimiento del maxilar inferior hacia los laterales y una ligera apertura de la mandíbula.

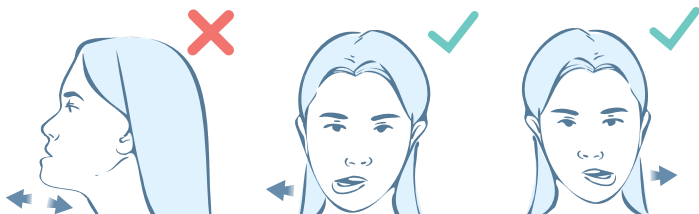

El avance puede regularse mediante las distintas longitudes de banda de somnipax guard standard, desde una posición neutral de la mandíbula (0 mm) hasta un avance de 12 mm.

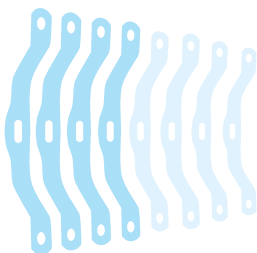

## Así se adaptará somnipax guard standard



Su médico le dirá en la consulta si lo mejor para usted es la terapia con la férula.

### **Se desaconseja el uso de la terapia con férula en los siguientes casos:**

dentadura postiza o prótesis parcial mal adherida;  
dolor en la articulación temporomandibular;  
recesión de las encías o aflojamiento de los dientes;  
menos de diez dientes en cada maxilar;  
personas menores de 18 años.

Su médico tiene la última palabra a la hora de decidir si la férula es el tratamiento óptimo.

La adaptación de la férula se llevará a cabo en la consulta médica. Para ello, en primer lugar, la férula para el maxilar superior se adaptará a la hilera superior de dientes.



Después se repetirá el proceso en el maxilar inferior. Por último, el médico ajustará el avance apropiado para usted y la férula estará lista para utilizarse.

Gracias a los componentes prefabricados y a los materiales de última generación, la colocación solo llevará unos minutos y su férula estará lista para ser utilizada inmediatamente después. El médico hablará directamente con usted de otras citas de seguimiento.

## Las ventajas de somnipax guard standard de un solo golpe de vista



**Experimentará un material suave en la boca:** la abertura natural de la mandíbula en posición de reposo es de aprox. 4 mm; lleve somnipax guard standard, de esta manera la mandíbula permanecerá abierta aprox. 6 mm: ¡apenas se nota la altura de mordida de la férula!



**Garantía de materiales comprobados y ausencia de sustancias nocivas:** somnipax guard standard se fabrica en Suiza bajo estrictas condiciones. Todos los ingredientes son biocompatibles y no contienen sustancias nocivas.



**Una férula - muchas situaciones de aplicación:** el avance de la férula puede adaptarse de forma individual por medio de las diferentes longitudes de banda. Su médico puede ajustar la férula de forma óptima.



**Sostenibilidad y eficiencia de gastos:** existen piezas de repuesto garantizadas para todos los componentes de somnipax guard standard.



**Aplicable de inmediato:** la férula se adaptará in situ en la consulta médica y puede llevarse a casa y utilizarse directamente.

*«Con la férula somnipax guard standard, mi apnea del sueño ha desaparecido casi por completo.»*

**HANS K., HERZOGENAURACH**



## somnipax guard standard: un trozo de alta tecnología para su salud



*«En este producto se esconden varios años de desarrollo y una estrecha colaboración entre médicos, ingenieros y técnicos de producción. somnipax guard standard aún a la precisión suiza con los últimos plásticos médicos de alto rendimiento.»*

### **DR. HANNES WAKONIG**

Director general de AescuBrands,  
Fabricante de somnipax guard standard

Si sufre de ronquidos o de interrupciones nocturnas de la respiración, hable con su médico acerca de somnipax guard standard. Comprobará con usted si la terapia con la férula es lo idóneo.

### **Contacto:**

Sello médico

**Editor:** AescuBrands UG (limitación de responsabilidad),  
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Alemania

**Estado:** 24-04-2024