


Ortesi di avanzamento mandibolare in 2 misure diverse

somnipax guard standard

(per mandibole
di dimensioni regolari)

somnipax guard large

(per mandibole
di grandi dimensioni)

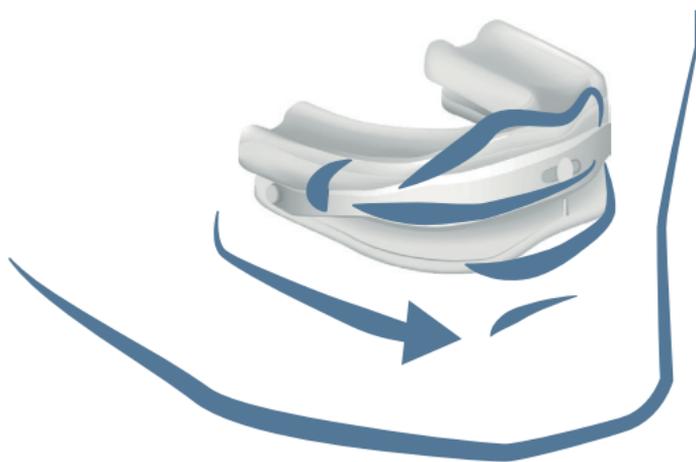

Ortesi contro il russamento semplice e le apnee notturne

Dispositivo di protrusione mandibolare per l'utilizzo in caso di apnea ostruttiva del sonno (OSAS) dipendente dalla posizione, nonché per il russamento originato alla base della lingua.

- **Elevato comfort:** appena percepibile in bocca grazie al suo materiale piacevolmente flessibile e al design poco voluminoso.
- **Adattabilità ottimale:** due misure disponibili (taglia normale / taglia grande); adattamento individuale di ogni ortesi alla propria mandibola.
- **Flessibilità:** avanzamento regolabile con precisione per ridurre al minimo il carico sull'articolazione mandibolare.
- **Subito pronta all'uso:** viene adattata sul posto nello studio medico e può essere immediatamente portata a casa e utilizzata dal paziente.


Come agisce un'ortesi di avanzamento mandibolare (“bite anti-russamento”)?

I rumori dovuti al russamento, ma anche le pause respiratorie notturne (“apnee”), si verificano quando i tessuti delle vie aeree superiori si rilassano e si distendono durante il sonno.

Se si dorme in posizione supina, questo rilassamento provoca in molti casi uno scivolamento della lingua all'interno della laringe, con conseguente restringimento o perfino blocco temporaneo delle vie aeree. Questo restringimento provoca turbolenze dell'aria e vibrazioni, causando il russamento. Quando le vie aeree sono completamente bloccate, si verificano le apnee.



Un'ortesi di avanzamento mandibolare come somnipax guard (standard / large) impedisce in modo molto efficace che la lingua si sposti all'indietro nella laringe durante il sonno.

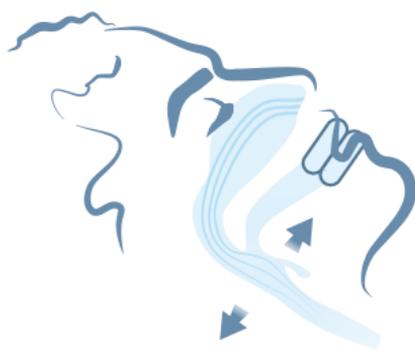

Come funziona? L'ortesi sposta la mandibola inferiore in avanti di alcuni millimetri e mantiene così leggermente in tensione il muscolo della lingua. Questa lieve tensione impedisce al muscolo della lingua di scivolare all'interno della gola. In questo modo, le vie aeree rimangono libere e il sonno non viene disturbato da pericolose interruzioni della respirazione né dai fastidiosi rumori legati al russamento.

Queste sono le ortesi somnipax guard standard e somnipax guard large

Entrambi i dispositivi hanno la stessa forma, ma si differenziano per la dimensione e (in piccola parte) per l'avanzamento regolabile.



L'ortesi per la mascella superiore viene adattata alla forma della fila di denti superiore, mentre la parte inferiore viene adattata alla fila di denti inferiore.

Collegamento tramite fascette


Le due parti dell'ortesi (superiore / inferiore) sono collegate fra loro da una fascetta di avanzamento in plastica. Questa assicura la protrusione, ma consente il movimento laterale della mandibola e la sua facile apertura.



Le diverse lunghezze delle fascette di somnipax guard (standard / large) permettono di regolare l'avanzamento:

somnipax guard standard: da una posizione neutra della mandibola (0 mm) fino a una protrusione di 12 mm.

somnipax guard large: da una posizione negativa della mandibola (-1 mm) fino a una protrusione di 9,5 mm.

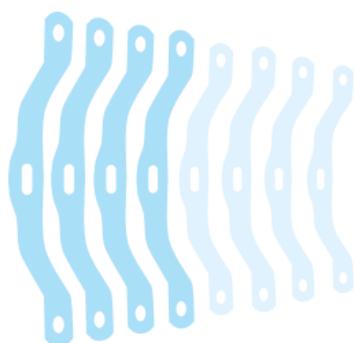

Come regolare l'ortesi somnipax guard (standard / large)



Durante l'anamnesi, sarà il vostro medico a determinare se siete idonei per una terapia con l'ortesi.

I seguenti punti rappresentano delle controindicazioni per la terapia con l'ortesi:

- Protesi dentaria rimovibile o protesi parziale non stabile;
- Dolore all'articolazione della mandibola;
- Recessione gengivale o allentamento dei denti;
- Meno di 10 denti per ciascuna mandibola;
- Non utilizzabile in persone di età inferiore ai 18 anni.

In ogni caso, la decisione definitiva sull'idoneità della terapia spetta al medico curante.

L'ortesi viene personalizzata direttamente nello studio medico. Inizialmente, il medico determina la dimensione della mandibola utilizzando un calibro di misurazione e seleziona la dimensione dell'ortesi adeguata (taglia regolare / taglia grande).



Quindi si procede con l'adattamento dell'ortesi della mascella superiore, che viene inserita nell'arcata dentaria superiore. In seguito, la procedura viene ripetuta per la mandibola inferiore. Infine, il medico imposta l'avanzamento corretto per il paziente e l'ortesi è pronta per essere utilizzata.

Grazie ai componenti preassemblati e ai materiali all'avanguardia, l'adattamento richiede solo pochi minuti e rende l'ortesi immediatamente utilizzabile. Le visite di controllo successive verranno definite direttamente con il vostro medico.


I punti di forza di somnipax guard (standard / large) in sintesi:



Ingombro ridotto in bocca: l'apertura naturale della mandibola in posizione di riposo è di circa 4 mm; indossando somnipax guard standard o large, la mascella rimane aperta circa 6 mm - l'altezza dell'ortesi sarà appena percepibile!



Materiali testati e garanzia di assenza di sostanze nocive: somnipax guard standard e large sono prodotti in Svizzera secondo standard rigorosi. Tutti gli ingredienti sono biocompatibili e privi di sostanze nocive.

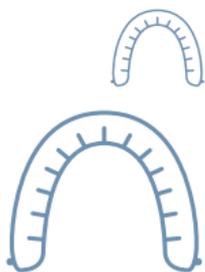

Vestibilità ottimale. Rapidità: il vostro medico determina con il calibro di misurazione l'ortesi adatta alla vostra mandibola (standard - per mandibole di dimensioni regolari / large - per mandibole più grandi) e procede direttamente con l'adattamento personalizzato. La procedura è molto semplice e richiede solo pochi minuti.



Un'unica ortesi per molteplici esigenze: l'avanzamento dell'ortesi viene regolato individualmente tramite le fascette di diverse lunghezze. Il vostro medico determina l'avanzamento necessario, voi potrete facilmente applicare la regolazione autonomamente.



Durevolezza ed efficienza in termini di costi: per tutti i componenti di somnipax guard standard e large sono disponibili pezzi di ricambio. Garantito!



Subito pronta all'uso: dopo la regolazione eseguita dal medico, potrete portare immediatamente l'ortesi a casa vostra per iniziare la terapia.

Ortesi somnipax guard: prodotti high-tech per la vostra salute



«Questi prodotti sono il risultato di diversi anni di ricerca e di una stretta collaborazione tra medici, ingegneri e tecnici di produzione. I nostri dispositivi combinano la precisione svizzera con i materiali plastici più moderni e ad alte prestazioni utilizzati in campo medico.»

DR. HANNES WAKONIG

Amministratore Delegato di AescuBrands,
Produttore dei dispositivi somnipax



«Con l'ortesi somnipax guard standard, le mie apnee notturne sono praticamente sparite.»

HANS K., HERZOGENAURACH

Se soffrite di russamento o apnee notturne, vi consigliamo di verificare con il vostro medico che la terapia con l'ortesi somnipax guard (standard / large) sia adatta alle vostre esigenze.

Il vostro referente:

Timbro del medico

Editore: AescuBrands UG (a responsabilità limitata),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Germania

Aggiornato al: 17.06.2024